

Biologisch • Sicher • Wirtschaftlich • *Fair*



FairWhite™



FairOne™




FairTwo™

Ihr einzigartiges System

- hervorragende Chirurgie
- einfache Prothetik
- Titan und Zirkon


FairImplant™ orientiert sich konsequent an der Biologie

- ✓ Gedeckt eingehheilte Implantation und Sofortimplantation erfolgen mit nur einem exakt aufeinander abgestimmten System
- ✓ **Außergewöhnliche Primärstabilität** durch Wurzelform und perfekt abgestimmten Formbohrern
- ✓ Maximaler IBIC für beschleunigte Osseo-integration
- ✓ Die Titanoberflächen sind mit Bonit® beschichtet, das nachweislich die Osseo-integration beschleunigt
- ✓ Die ZircaPore®-Oberfläche von FairWhite ist ohne Strahlen und Rissinduktion aufgebracht; Ergebnis ist eine vergleichbar gute Osseo-integration wie bei bewährten Titan-oberflächen

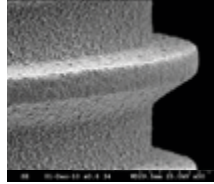


REM: einwandfreie Fertigungsqualität
(Quelle: Uniklinik Köln, Implantatstudie 2011)

Sandgestrahlte Oberfläche vs. ZircaPore®

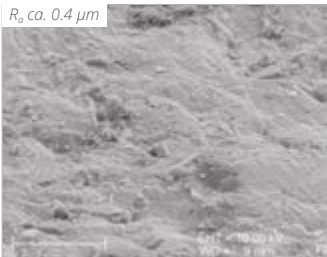

Implantatoberfläche Zirkonoxid sandgestrahlt

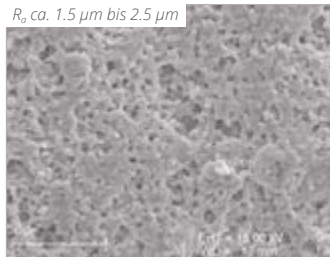

Patentierte keramische Oberfläche ZircaPore®

Quelle: METOXIT AG

Qualität aus Deutschland



FairTwo-Insertion:
Initiale Benetzung der hämatophilen Oberfläche

Perfekte Formkongruenz der Bohrer = außergewöhnliche Primärstabilität




Ein System für einzeitige und zweizeitige Versorgung

FairImplant™ bietet dem Chirurgen wichtige Vorteile für seine Arbeit und in der Wirtschaftlichkeit

- ✓ Ein System für zwei Implantat-Typen aus Reintitan
- ✓ Das Instrumentarium unterstützt minimalinvasive Behandlungen
- ✓ Laufruhige, selbstzentrierende Bohrer mit außergewöhnlicher Schnittfestigkeit
- ✓ Die einheitliche Aufbereitung ermöglicht es Ihnen sogar während der OP den Implantattyp zu wechseln, zum Beispiel wenn sich die Knochenqualität anders darstellt, als eingeschätzt
- ✓ Abgestimmte Instrumente für alle Knochensituationen wie Formbohrer, Gewindeschneider, Erweiterungsbohrer und Osteotome
- ✓ Spezielles Bohrer-Design zur **Gewinnung von autologem Knochen** während der Implantatbett-Aufbereitung ohne zusätzliche Entnahmestelle

Im Alltag werden Sie sehr schnell merken, dass das FairImplant-System in der Entwicklung ganz wesentlich von Praktikern gestaltet wurde.

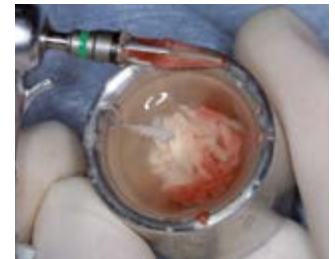

FairOne und FairTwo Komplett-Tray

FairOne™/FairWhite™: So einfach wie ein Zahnstumpf

Beide Implantate verfügen über einen prothetischen Kopf, der sofort abformbar ist. Sollte eine Präparation nötig sein, so lässt sich das Titan bzw. das Zirkon wie ein Zahnstumpf bearbeiten.



FairOne™ Größen: Ø 2,8 bis 6,0 mm; Längen 8 bis 16 mm

FairWhite™ Größen: Ø 3,7 bis 5,4 mm; Längen 9 bis 14 mm

FairTwo™ mit Insertionsabutment



Konisches Implantat mit patentiertem Rotationschutz und Platform-Switching.

Das Insertionsabutment ermöglicht die einfache bzw. sichere Entnahme und Insertion.

Das Insertionsabutment kann gut als Bissregistraturpfosten oder für die provisorische Versorgung verwendet werden

FairTwo™ unterstützt CAD/CAM-Abläufe, z.B. in exocad, 3Shape, cerec, PreForm.


FairTwo™ Größen: Ø 3,5 bis 6,0 mm; Längen 7,5 bis 17,5 mm

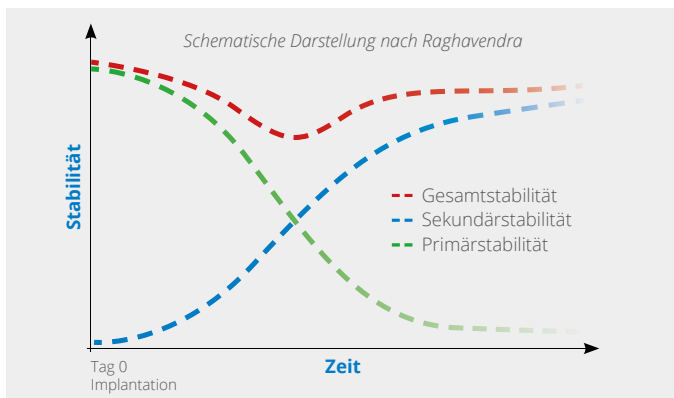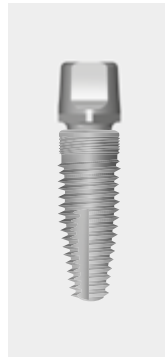

Primärstabilität und schnelle Osseointegration sind für die Gesamtstabilität entscheidend

FairWhite™: die keramische einteilige Alternative

- patentierte ZircaPore®-Oberfläche
- außergewöhnlich hohe Primärstabilität
- besonders bruchstabile Konstruktion

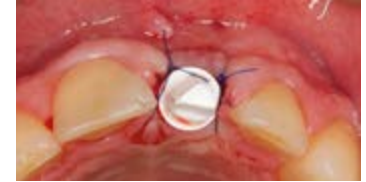

Implantieren kann so einfach sein.

SCAN ME:

Kurzvideo (ca. 2 Minuten) „Implantation FairWhite“

FairWhite™ setzt Maßstäbe

1. präparierbarer prothetischer Kopf
2. hohe Festigkeit durch eine keramigerechte Formgestaltung
3. selbstschneidendes Gewinde und formkongruente Bohrer für besten IBIC
4. ZircaPore® – Schicht für verbesserte Knochenanlagerung



Aus der Praxis für die Praxis

Bei FairImplant können Sie sicher sein, dass alle Implantate und jedes Zubehörteil den Anforderungen des Praxis-Alltages gerecht werden. Es ist **nur ein System** für die Praxis notwendig.

Die ersten Anstöße zur Entwicklung des FairOne kamen von Praktikern und die komplette Entwicklung aller Implantate und Instrumente wurde entscheidend durch diese mitgeprägt. Nicht zuletzt aus diesen guten Erfahrungen ist es Geschäftsphilosophie, aktive Fortbildungsgruppen, wie z.B. die FRAGA DENTAL StudyClubs regelmäßig mit Rat und Tat zu unterstützen.

2017 gibt es z.B. für jeden Teilnehmer der FairWhite™ im Rahmen des FRAGA DENTAL StudyClubs setzt, pro Treffen ein Keramikimplantat ohne Berechnung. Sollten Sie mit Ihrer Studiengruppe an diesem Programm interessiert sein, so sprechen Sie uns gerne an.

Fairness ist Philosophie

Unser Slogan "**Biologisch · Sicher · Wirtschaftlich · Fair**" gilt für alle die mit unseren Produkten in Berührung kommen. Arzt und Patient können sicher sein:

- biologisch optimiertes Produkt
- Premium-Fertigungsqualität frei von Rückständen
- optimiert für den Einsatz in der implantologischen Praxis

Ihr Behandlungserfolg zählt

2015 konnten wir den über 10 Jahre erfolgreichen klinischen Einsatz feiern. Unsere in den chirurgischen Abläufen geschulten Kundenbetreuer sind bestrebt darin, dass Sie Ihre Patienten erfolgreich mit ein- und zweiteiligen Implantaten versorgen.

Wann behandeln Sie mit FairImplant?



**Sprechen Sie uns für
eine OP zum unverbindlichen Kennenlernen an:**

Tel. 040 25 33 055-0



Biologisch

- IBIC: maximaler initialer Knochen-/Implantatkontakt
- Berücksichtigung biologischer Breite bei FairOne™/FairWhite™
- virtuell einteilig durch konische Innenverbindung bei FairTwo™
- spezielle Oberflächenrauheit für optimierte Schleimhutanlagerung
- CaP-Beschichtung für beschleunigte Osseointegration (BONIT®)
- Implantate in Zahnwurzelform
- biokompatibles Reintitan bzw. Zirkon
- Instrumente für schonende, minimalinvasive OPs



Sicher

- Bohrer selbstzentrierend und äußerst laufruhig
- Implantatform unterstützt Grenzindikationen (geringe Knochenqualität und -höhe, enge Situation, Sinuslift, Knochenspreizung)
- Instrumentarium für harten/weichen Knochen
- umfangreiche Größenauswahl für Ihre Indikation von Ø2,8 bis 6,0 mm in Längen von 7,5 bis 17,5 mm
- hochfeste Keramik (2.000 MPa)



Wirtschaftlich

- einzeitige Behandlung mit FairOne™ / FairTwo™ / FairWhite™ senken die Gesamtbehandlungskosten signifikant im Vergleich zu gedeckter Einheilung hinsichtlich Stuhlzeiten, Materialkosten und Laboraufwand
- bei gedeckter Einheilung existieren günstige Versorgungsoptionen mit LOCATOR® oder One Piece Abutments
- die laufruhigen Bohrer verfügen über sehr hohe Standzeiten und sammeln hervorragend Knochenspäne
- nur ein System für nahezu alle Indikationen



Fair

- kompetente Beratung
- höchste Fertigungsqualität
- systematisch ständig weiterentwickeltes System zu einem fairen Preis

Wir sind für Sie da:

Wenn Sie uns eine kurze E-Mail mit Ihren Kontaktdaten schicken, geben wir diese an den regional Zuständigen weiter, der sich umgehend bei Ihnen melden wird. Natürlich können Sie uns auch gerne direkt anrufen.

Tel. 040/25 33 055-0 • info@fairimplant.de

Detaillierte Informationen zu einzelnen Artikeln finden Sie auch unter:
www.fairimplant.de/shop

Die Geschäftsleitung



Daniel Fraga
(Vertrieb)



Dipl.-Ing.
Jörn Thurow
(Entwicklung)



FairImplant GmbH

info@fairimplant.de • www.fairimplant.de
Kieler Straße 103-107 • 25474 Bönningstedt
Tel. 040 25 33 055-0 • Fax-29

P.S. Die außergewöhnliche Fertigungsqualität wird regelmäßig durch unabhängige Studien bestätigt.