


# FairOne Implantat 6,0 x 10 mm

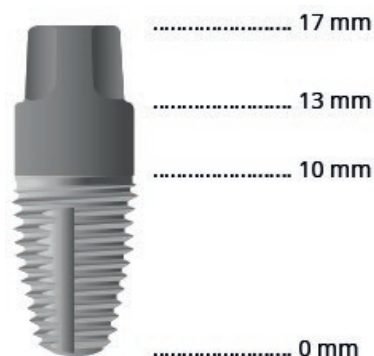

## Artikelnummer 10 60 10

- Einteiliges dentales Implantat mit ausgezeichneter Primärstabilität, resorbierbare Kalziumphosphatbeschichtung zur nachweislich beschleunigten Osseointegration,
- spezielle Zone zur Weichgewebsintegration und prothetischem Kopf

## Eignung / Freigabe

- Einzelzahnersatz,
- mehrgliedrige Brücken,
- zahnloser Kiefer

## Werkstoff und Eigenschaften

- Reintitan medical grade 4,
- Oberfläche gestrahlt (AIO)
- Beschichtung: BONIT®, 2 phasiges Kalziumphosphat,
- Schichtdicke ca. 20 µm, blättert nicht ab, resorbierbar

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- Sterile Primärverpackung: medizinisches Kunststoffröhrchen mit Titanschutzhülle und Deckel
- Sterile Sekundärverpackung: medizinischer Blister mit Sterilisationsindikator für Gammastrahlen (roter Punkt zeigt: ist bestrahlt worden; gelber Punkt zeigt: keine Bestrahlung)
- Karton: enthält zusätzlich Aufkleber für Patientenakte

## Aufbereitung

- Das Implantat ist steril verpackt.
- Eine Resterilisation ist nicht möglich

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Insertion:**
  - Einschraubschlüssel FairOne friktiv Ø 5,0 (Artikel 90 50 01) oder
  - Einschraubschlüssel FairOne Ø 5,0 (Artikel 90 50 02)
- **Implantatbettauflbereitung:**
  1. Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
  2. Formbohrer Ø 3,5 Länge 10 mm (Artikel 21 35 10)
  3. Formbohrer Ø 4,2 Länge 10 mm (Artikel 21 42 10)
  4. Formbohrer Ø 5,0 Länge 10 mm (Artikel 21 50 10)
  5. Formbohrer Ø 6,0 Länge 10 mm (Artikel 21 60 10)optional bei hartem Knochen:
  - 5b) Erweiterungsbohrer Ø 6,0 Länge 10 mm (Artikel 22 60 10)
  - 5c) und/oder Gewindeschneider Ø 6,0 (Artikel 23 60 00)
- **Zubehör:**
  - Laboranalog Ø 6,0 (Artikel 80 60 01)
  - Bohrhülse Ø 6,0 (Artikel 23 60 00)
  - Führungsstift und Stanze Ø 6,0 (Artikel 30 60 01 und 30 60 02)
  - Richtungsindikator Ø 5,0 (Artikel 90 50 03)
  - Osteotom gerade/gewinkelt Ø 6,0 (Artikel 30 60 11 und 30 60 12)
  - Röntgenschablone 100% und 130% (Artikel 99 01 00 und 99 01 30)
  - Implantatpässe (Artikel 99 00 00)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Prothetikhandbuch
- Bonitdatenblatt