


# Pilotbohrer 2,0 x 16 mm

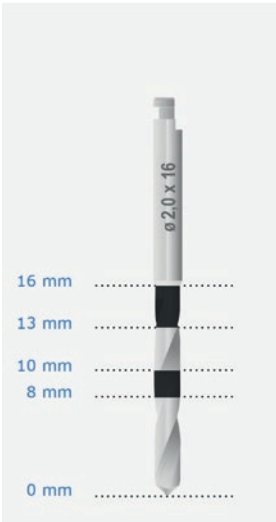

## Artikelnummer 20 20 16

- Dieser Pilotbohrer wird für die Aufbereitung der Durchmesser 5,0 und 6 mm verwendet. Zusätzlich ist er notwendig, um die Führungsstifte der Schleimhautstanzen zu nutzen

## Eignung /Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- CAVE! bei Implantaten mit Durchmesser 3,5 und 4,2 mm ist der Bohrer nur auf Nennlänge des Implantates weniger 2 mm einzusetzen, sonst ist die Primärstabilität vermindert und verlängert sich die Einheilzeit

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- Führungsstifte für Stanze  
(Artikel 30 35 01 / 30 42 01 / 30 50 01 / 30 60 01)
- **Zubehör:**
  - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung