


Pilotbohrer für Schablonen 2,0 x 19 mm

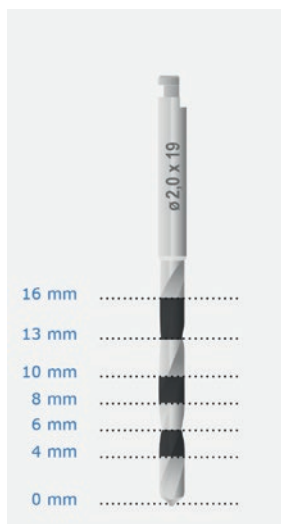

Artikelnummer 20 20 20

Eignung /Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- CAVE! bei Implantaten mit Durchmesser 3,5 und 4,2 mm ist der Bohrer nur auf Nennlänge des Implantates weniger 2 mm einzusetzen, sonst ist die Primärstabilität vermindert und verlängert sich die Einheilzeit

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Führungsstifte für Stanze
(Artikel 30 35 01 / 30 42 01 / Artikel 30 50 01 / Artikel 30 60 01)
- **Zubehör:**
 - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung