


# Abutment Metallbasis L lang

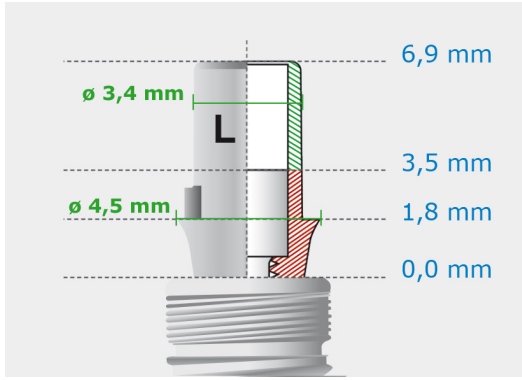

## Artikelnummer 40 50 04

- **vormals Abutment scanbar**
- Für FairTwo Platform L (Durchmesser 5,0 und 6,0 mm)
- Metallbasis Abutment für maximale Gestaltungsmöglichkeiten, optimiert für CAD/CAM Technik der Variante normale Schleimhaut
- Das Abutment verfügt über eine konische Innenverbindung zum Implantat mit Platform Switching, ein zum Patent angemeldeten Rotationsschutz mit minimalem Spiel, die Abutmentschraube fällt nicht heraus und kann herausgedreht werden.
- Der Abutmentkamin ist leicht konisch und verfügt über eine Rotationssicherung.

## Eignung /Freigabe

- Labor: Eindrehmoment max. 10 Ncm
- Definitives Eindrehmoment: 25 Ncm

## Werkstoff und Eigenschaften

- Abutment: Reintitan medical grade 4
- Abutmentschraube: Titan medical grade 5

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)
- Einheilkappe L kurz (Artikel 42 20 03)
- Einheilkappe L lang (Artikel 42 20 07)
- Einheilkappe Standard L lang (Artikel 42 20 06)
- Abutmentauswerfer L (Artikel 91 20 00)
- Abutmentschraube L (Artikel 41 20 00)

## Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung
- Scan-Bibliotheken exocad und 3shape