


# Drehmomentratsche 10 bis 70 Ncm

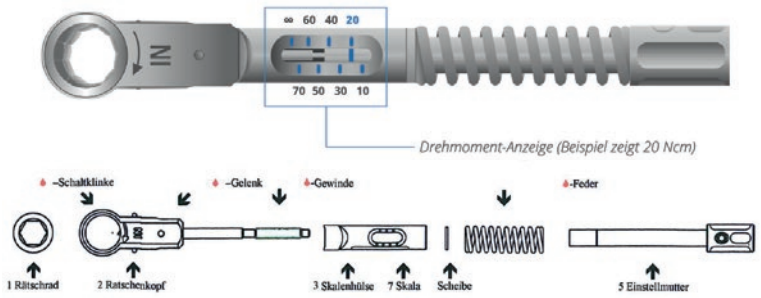

## Artikelnummer 90 00 11

- Robuste, langlebige, leicht zu handhabende Ratsche mit unkomplizierter Aufbereitung bestehend aus:
  - Rätsschrad
  - Ratschenkopf mit Gewindestange
  - Skalenhülse
  - Feder
  - Einstellmutter

## Eignung / Freigabe

- Die Einstellung des Drehmomentes erfolgt über die Einstellmutter mit Skalen Ncm 10/20/30/40/50/60/70/∞. Der Eingestellte Wert kann über die Skalenhülse abgelesen werden
- Eine Lagerung im montierten Zustand ist bis Einstellung 10 Ncm möglich

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl und Kunststoffscheibe
- Toleranz ca. 5%, maximal 10%

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- Schlauchbeutel mit Gebrauchsanweisung

## Aufbereitung

- Sterilisierbar
- Achtung: Schmierung muss nach der Aufbereitung an den rot markierten Stellen sichergestellt sein; insbesondere Gewindestange

## Verbundene Teile, Zubehör

- Ratschenadapter Einschraubschlüssel (Artikel 90 00 03)
- Minischraubendreher kurz (Artikel 90 00 07 für manuell/Ratsche)
- Minischraubendreher lang (Artikel 90 00 08 für manuell/Ratsche)
- Minischraubendreher XL (Artikel 90 00 10 für manuell/Ratsche)
- Abutmentauswerfer S/L (Artikel 91 16 00 / 91 20 00)
- Schraubendreher LOCATOR™ (Artikel 90 00 09)
- **Zubehör:**
  - Rätsschrad (Artikel 90 00 11R)

## Weiterführende Informationen

- Gebrauchsanweisung
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung